

## LIMS myLab версия 1.38.23

### Дистрибутивы

Установка производилась на образе ОС: Альт Рабочая Станция 10.1

```
Linux host-15 5.10.82-std-def-alt1 #1  
SMP Fri Dec 3 14:49:25 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux
```

WINE@Etersoft 8.0 - **wine-etersoft-install.sh**

.Net Framework 4.8 - **dotnet-install.sh**

Прикладное ПО: LIMS myLab версия 1.38.23 (32 bit) - **LIMS\_myLab\_Install.exe**

### Предварительные условия

Альт Рабочая станция 10 ставится с профилем по умолчанию, диск разбивается автоматически.

Установка любой программы выполняется на чистой системе только после обновления системы и ядра до актуального состояния:

```
# epm full-upgrade
```

и последующей перезагрузки системы.

### Установка WINE@Etersoft


1. Запустить скрипт автоматизированной установки WINE@Etersoft:

```
# sh wine-etersoft-install.sh
```

2. Выполнить в графическом терминале команду:

```
$ winecfg
```

В процессе настройки на непродолжительное время должно появиться окно с информированием о выполнении обновления конфигурации. После завершения процесса настройки должно появиться окно настроек Wine — программы winecfg. Необходимо выбрать версию Windows (Windows 10) по умолчанию.

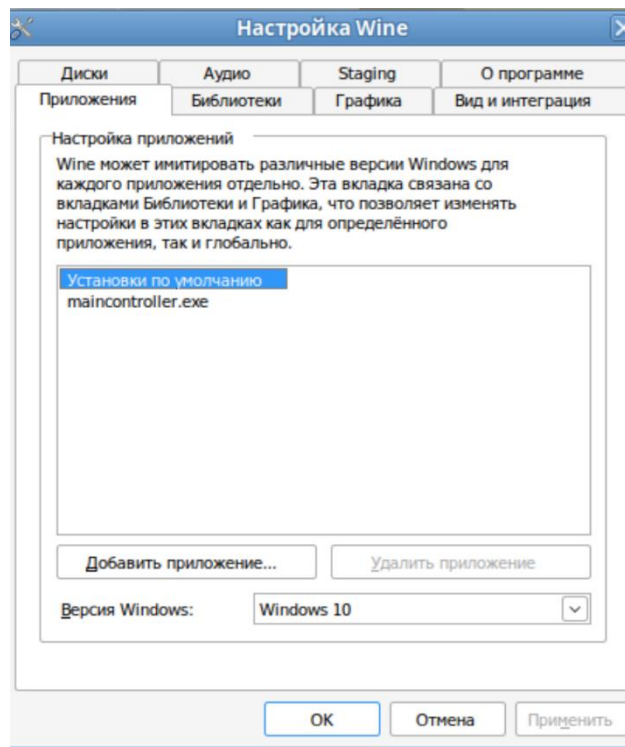

## Установка .Net Framework 4.8

3. Создать 32-х разрядный префикс

```
WINEARCH=win32 WINEPREFIX="/home/$USER/.wine_prefix" winecfg
```

4. Переключить на суперпользователя root (требуется пароль)

```
su -
```

5. Установить Winetricks (возможна установка из Менеджера пакетов)

```
apt-get install winetricks
```

6. Переключить на текущего пользователя

```
exit
```

7. Установить .Net Framework 4.8

```
winetricks dotnet48
```




## Установка LIMS myLab




Запустить скрипт автоматизированной установки LIMS myLab выполнив в графическом терминале команду:

```
$ wine LIMS_myLab_Install.exe
```

в корне директории с дистрибутивом LIMS myLab.

Далее идет стандартный процесс установки.

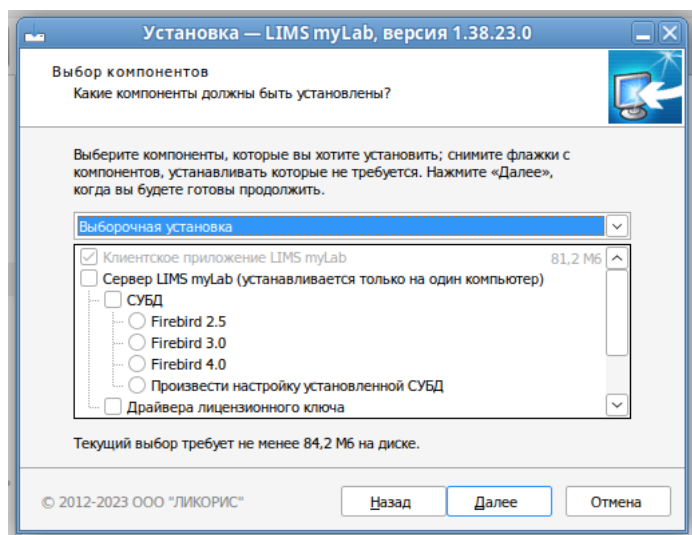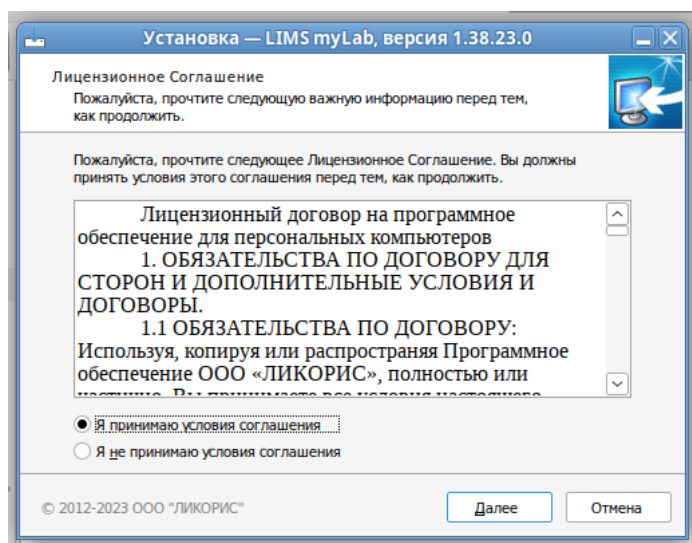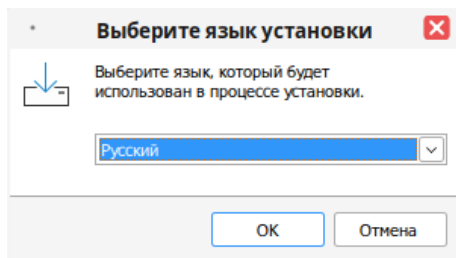


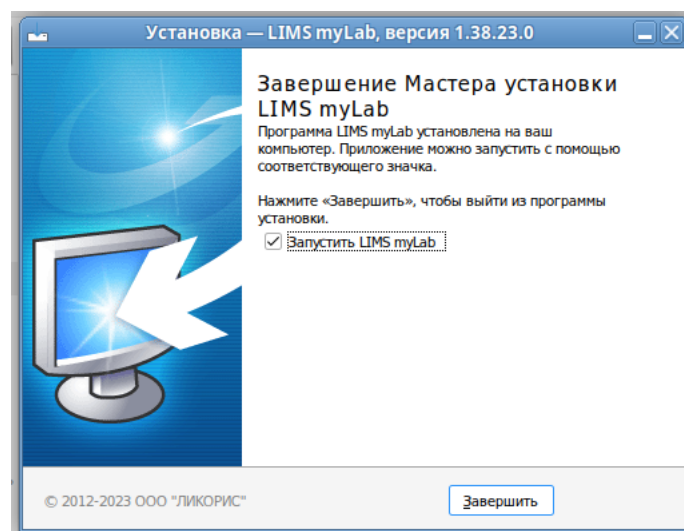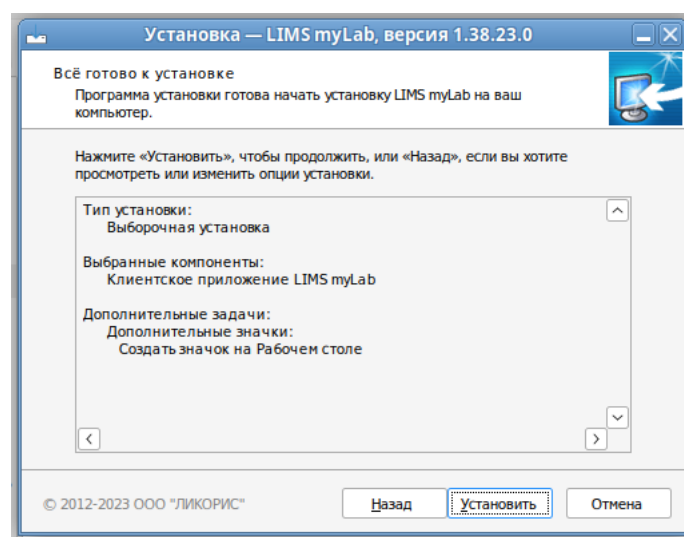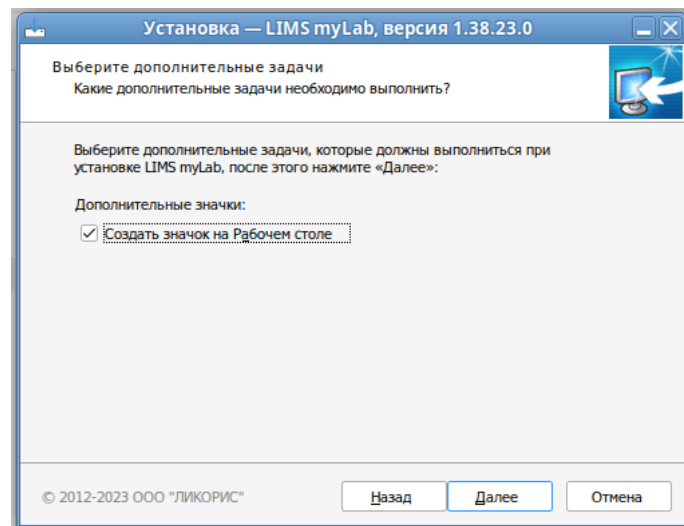

Программа установлена в каталог /home/test/.wine/drive\_c/Program Files/LIMS myLab

**Запуск LIMS myLab**

Запуск программы происходит через соответствующую пиктограмму, которая появится на рабочем столе

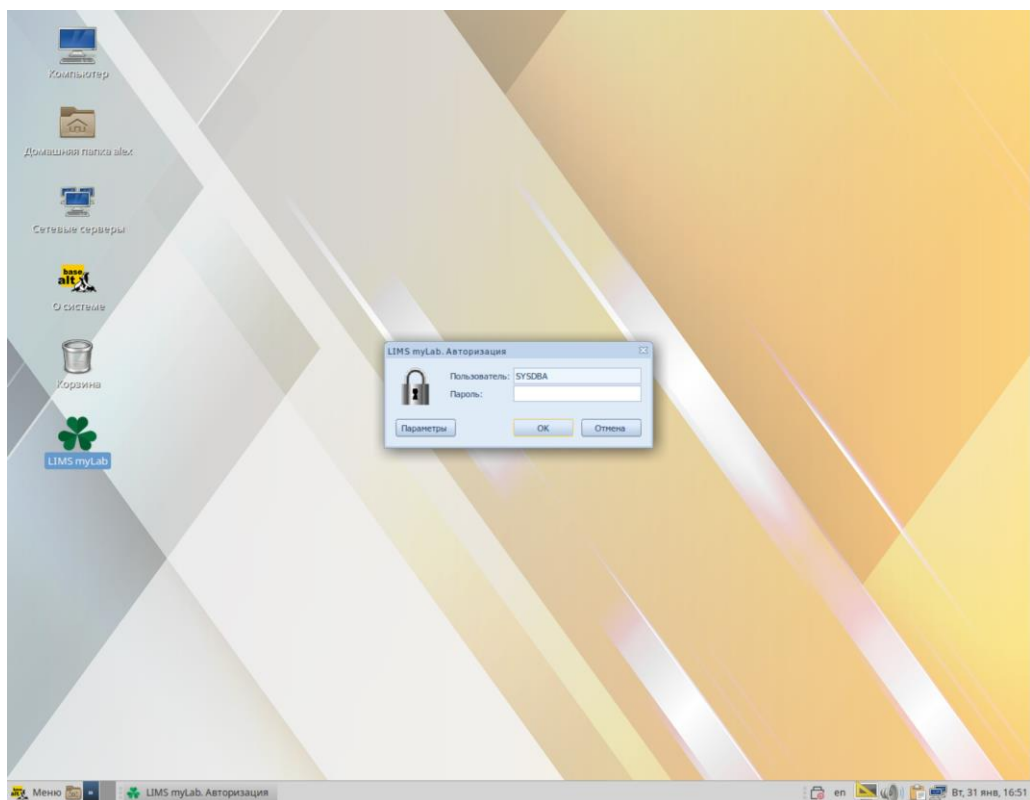

Программа готова к работе в ОС «Альт Рабочая станция» 10

